

取り直し不要！ ウェスタンブロットの撮影はますます簡単に

化学発光撮影装置 iBright Imaging System 導入支援キャンペーン

イメージャーをお使いの際、過剰露光や露光不足で撮り直し、という経験ありませんか？ Invitrogen™ iBright™ Imaging Systemsは、そんなよくあるムダをなくすべく SmartExposure™ テクノロジーを採用。ボタン1つで“一発でキマル”撮影を実現させました。この他にもオートフォーカス、オートズームなど便利な自動化機能により、使用者を選ばない使いやすさを追求しています。

- 操作性に優れたシンプルデザインのタッチパネルを採用
- SmartExposure テクノロジーや自動調整機能で手間と時間を短縮
- ご利用いただく方の経験やレベルを問わず最適な画像の取得が可能
- Thermo Fisher Connect のクラウドを使うと、撮影後は場所を選ばずデータの閲覧・解析・シェアが可能
(コンピュータ用解析ソフトウェアもご用意)

化学発光撮影装置 iBright CL1000 Imaging System



通常価格
¥2,980,000が...

¥2,000,000

キャンペーン番号： **RGEK2E**

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

期間：2019年5月13日(月)～2019年7月31日(水) 弊社受注分まで

最適な画像を素早く取得

iBright CL1000 Imaging Systemは、9.1 メガピクセルという圧倒的な高解像度画像を実現し、化学発光ウェスタンブロット、タンパク質およびDNA ゲルのイメージングが可能です。

タンパク質ゲルモード



Coomassie 染色、銀染色に対応

核酸ゲルモード



エチジウムブロマイド染色および Invitrogen™ SYBR™色素染色に対応

化学発光ブロットモード




HRP および AP 基質を使用した一般的な化学発光に対応

iBright FL1000 は蛍光マルチプレックス検出に

Invitrogen™ iBright™ FL1000 Imaging Systemは、iBright CL1000 Systemの機能に加えて、5チャンネル(RGB, 近赤外, 赤外)に対応。最大4色の蛍光ウェスタンブロットのマルチプレックス検出が可能です。

※ iBright FL1000 Systemは、本キャンペーン対象外です。

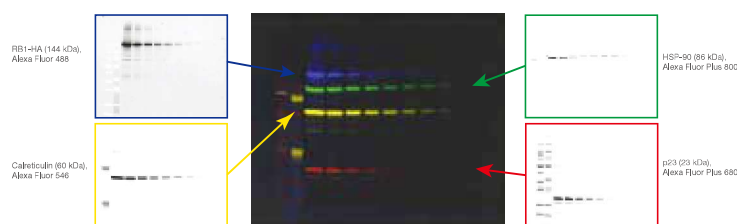

4色蛍光ブロットの個々のチャンネル(左右のパネル)とマージ画像(中央のパネル)

仕様

iBright CL1000 Imaging System	
カメラ	冷却 CCDカメラ (16ビット)
レンズ	25 mm, f/0.95
アレイサイズ(画素)	3,380 × 2,704、9.1 メガピクセル
視野	22.5 × 18.0 cm
励起光源	緑色 LED、トランスイルミネーター
画像ファイル形式	TIFF、JPG、PNG、G2i (解析アプリ専用)
コンピュータ	内蔵
内蔵ハードディスクドライブ	64 GB
タッチスクリーンディスプレイ	12.1 インチタッチスクリーン
ポート	2 USB、1 Ethernet
本体サイズ (L×W×H)	68.0 × 38.2 × 59.8 cm
重量	50 kg

Ordering information

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
iBright CL1000 Imaging System (化学発光撮影装置)	A32749	¥2,980,000	¥2,000,000
iBright FL1000 Imaging System (化学発光・蛍光撮影装置)	A32752	¥3,980,000	-

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. ©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2019年5月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

販売店

PA051-A19050B

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC